

Método para realizar análisis de *Salmonella*

1. PROPÓSITO.

Plantear el método para determinar microorganismos patógenos *Salmonella* en muestras de producto grado alimenticio.

2. EQUIPO Y MATERIAL:

- Kit Reveal 2.0 para *Salmonella*.
- Incubadora.
- Vaso de precipitados de 1000 mL.
- Agua esterilizada.
- Balanza.
- Cronometro.

3. PROCEDIMIENTO.

- 3.1.1 Tomar del kit las bolsas estériles e identificar con los datos de la muestra a analizar.
- 3.1.2 Colocar el vaso de precipitado con la bolsa homogeneizadora del kit sobre la balanza y abrir la bolsa.
- 3.1.3 Añadir 200mL de agua destilada estéril precalentado a 42°C a la bolsa.
- 3.1.4 Transferir el contenido de un sobre de aluminio con el medio Revive (9705) a la bolsa homogeneizadora que contiene el agua estéril, cierre la bolsa y mezclar de lado a lado hasta la disolución total del medio.
- 3.1.5 Agregar 25 g de la muestra que se requiere analizar, la muestra debe estar a temperatura ambiente, en la bolsa homogeneizadora que contiene el medio Revive.
- 3.1.6 Disolver perfectamente la muestra con el medio.
- 3.1.7 Cerrar la bolsa de sin apretar demasiado y colocar en una incubadora a 36°C± 1°C durante 4 hrs.
- 3.1.8 Colocar en una segunda bolsa homogeneizadora 200 mL de agua estéril purificada precalentada a 36°C± 1°C.
- 3.1.9 Adicionar el contenido del medio de 2x RV concentrada del kit (9715).
- 3.1.10 Disolver perfectamente el medio en el agua y mantener a 42°C hasta utilizarlo.
- 3.1.11 Una vez transcurrido el tiempo, sacar de la incubadora a 36°C ± 1°C el primer medio de cultivo
- 3.1.12 Añadir el segundo medio preparado 2xRV precalentado a 42°C en la bolsa de muestra al medio de cultivo Revive.
- 3.1.13 Cerrar la bolsa sin apretarla demasiado y homogenizar.
- 3.1.14 Incubar la bolsa a 42°C ±1°C durante 16 a 24 h.
- 3.1.15 Transcurrido el tiempo de incubación, retirar la muestra enriquecida de la incubadora. Mezcle bien y con la ayuda de gotero colocar 8 gotas en el recipiente graduado de muestra Reveal.
- 3.1.16 Coloque el dispositivo de Reveal con las flechas de muestra mirando hacia abajo en el recipiente graduado de muestra.
- 3.1.17 Esperar 15 min. a que corra la prueba y hacer la lectura.

Método para realizar análisis de *Salmonella*

4. RESULTADOS.

4.1 Los resultados se interpretan de acuerdo con la siguiente tabla.

Apariencia de la placa de reacción	Resultado
Líneas en la zona de control y zona de prueba	Positivo
Línea en la zona de control	Negativo
No aparece línea en zona de control	Inválido

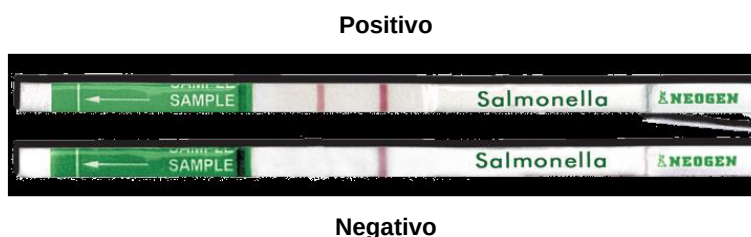


Figura 1. Diagrama de placa de reacción. Se ejemplifica un resultado positivo y negativo.

4.2 La intensidad de color en la línea es directamente proporcional a la concentración en que se encuentre la bacteria *Salmonella*.

5. ELIMINACION.

5.1 Todo el material de microbiología que ya se utilizó para análisis se coloca en bolsas o contenedores de color rojo para RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos) y se colocan en bote especial para depósito de los residuos infecciosos.

5.2 Los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) son recolectados de manera mensual por una empresa especializada y autorizada para el tipo de residuo en cuestión.

6. REFERENCIA.

REVEAL 2.0 Research Institute Performance Tested Method study (Neogen). A.O.A.C. licencia No. 960801.